

SUPER
LANÇAMENTO

Autoclaves Hospitalares Cristófoli



Autoclave
CH 350
Litros



16
SISTEMAS DE
SEGURANÇA

23
PROGRAMAS

MODELO DE
350 LITROS
COM
2 PORTAS



- Tela IHM colorida touch screen de 7 polegadas.
- Controle de usuários e níveis de permissão de operação com senha.
- Condutivímetro para monitorar a qualidade da água na geração de vapor.
- Impressora matricial de impacto (item de série).

Autoclave
CH 350
Litros



EFICIÊNCIA

- Alto desempenho com menor consumo de energia elétrica.
- Sistema de pré-aquecimento para otimização do tempo dos ciclos.
- Gerador de Vapor acoplado à câmara externa: vaporização rápida e uniforme.
- Sistema de vácuo com bomba de alta eficiência.
- Secagem completa e eficaz por meio de alto-vácuo.
- Bomba de água autoescorvante e autoaspirante em aço inox.



SEGURANÇA

- 2 Programas para teste de eficiência, Bowie & Dick (verifica a remoção de ar) e Leak Test (verifica vazamento de pressão).
- Sistemas de segurança: elétrico, mecânico e eletrônico.
- Portas com abertura e fechamento automáticos na posição vertical, com sistema de segurança antiesmagamento.
- Botão liga/desliga e de emergência no painel frontal, de fácil acesso.
- Tampas e câmara interna em aço inox 316L.
- Gabinetes externos e estrutura modular em aço inox.
- Controle de usuários e níveis de permissão com senha.
- Entrada para sensores de validação termométrica.



REAL TIME

- Tela IHM colorida touch screen de 7" multifuncional.
- Sistema de alerta de manutenções.
- Conexão Wi-Fi para auxiliar as manutenções.
- Manômetro (câmara externa) e Manovacuômetro (câmara interna).



ESTERILIZAÇÃO

- Sequência de 4 pulsos de vácuo e 3 de injeções de vapor, nos ciclos pré-programados.
- 14 Programas pré-configurados e 8 programáveis pelo usuário.
- Gestão inteligente de controle de pressão, temperatura e tempo, que garante o padrão normativo de esterilização.
- Geração de relatório com informações e registros do programa, salvos na memória e impressos em papel, em conformidade com a RDC nº 15.



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- Sistema de alarme que indica falhas de funcionamento.



LEGISLAÇÃO


- Registro na Anvisa nº 10363350017.
- Fabricadas no Brasil de acordo com as normas nacionais e internacionais de qualidade e segurança.
- Nível de ruído de acordo com o estabelecido pela portaria ministerial do Trabalho.




PÓS-VENDA

- Assistência Técnica Especializada.
- Agilidade no diagnóstico e nas manutenções.
- Atendimento disponível por telefone e WhatsApp.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

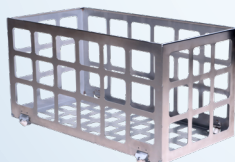

Cesto interno em aço inox, dimensões 30x30x60 cm.

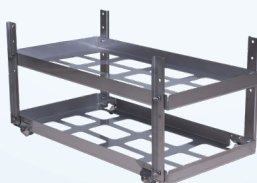

Rack interno com prateleiras em aço inox, dimensões 69,92x53,50x60,80 cm.



Carro externo com prateleira em aço inox, dimensões 56,8x107,11x119,95 cm.



Osmose reversa, água purificada para a geração de vapor, com capacidade de produção de 60 litros por hora e reservatórios de 50 ou 100 litros.



Compressor isento de óleo, reservatório em aço inox, 2 HP, 40 litros.

CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.

Rua São José, 3209 - Área Urbanizada II

CEP 87307-799 Campo Mourão - PR

☎ 44 3518-3464 | ✉ larissa@crisstofoli.com

☎ 44 3518-3485 | ✉ fabio@crisstofoli.com

www.crisstofoli.com

**SOLICITE SEU
ORÇAMENTO**


CRISTÓFOLI
HOSPITALAR