

**VENDA E  
LOCAÇÃO**

# AUTOCLAVES Hospitalares CRISTÓFOLI



- Câmara cilíndrica horizontal com capacidade de 100 litros.
- 1 ou 2 portas com sistema de fechamento e travamento vertical utilizando motores elétricos.
- Sistema de segurança antiesmagamento.



- Botão liga/desliga e de emergência.
- Manômetro (câmara externa).
- Manovacuômetro (câmara interna).



- Tela IHM colorida touch screen de 7 polegadas.
- Controle de usuários e níveis de permissão de operação com senha.
- Impressora matricial de impacto (item de série).



Autoclave  
CHR 100 litros



Autoclave  
CHR 100 litros

**16**

SISTEMAS DE  
SEGURANÇA

**24**

PROGRAMAS

MODELOS  
DE 100 LITROS,  
COM 1 OU 2  
PORTAS

## EFICIÊNCIA



- Alto desempenho com menor consumo de energia elétrica.
- Preaquecimento para otimização do tempo.
- Gerador acoplado à câmara externa, vaporização rápida e uniforme.
- Sistema de vácuo com bomba de alta eficiência.
- Secagem completa e eficaz, com alto-vácuo.
- Bomba de água autoescorvante e autoaspirante em aço inox.

## SEGURANÇA



- 2 Programas para teste de eficiência, Bowie & Dick (verifica a remoção de ar) e Leak Test (verifica vazamento de pressão).
- Sistemas de segurança elétricos, mecânicos e eletrônicos.
- Portas com abertura e fechamento automático, através de deslizamento vertical com sistema de segurança antiesmagamento.
- Botão liga/desliga e de emergência no painel frontal, de fácil acesso.
- Câmaras, Tampa, Gerador de Vapor e Resistências em aço inox.
- Condutivímetro para monitorar a qualidade da água na geração de vapor.
- Controle de usuários e níveis de permissão com senha.
- Conexão de entrada de sensores para a validação termométrica.

## REAL TIME



- Tela IHM colorida touch screen de 7" multifuncional.
- Sistema de alerta de manutenções.
- Conexão Wi-Fi para auxiliar as manutenções.

## ESTERILIZAÇÃO



- Sequência de 4 pulsos de vácuo e 3 de injeções de vapor, nos ciclos pré-programados.
- 14 Programas pré-programados e 8 Programáveis pelo usuário.
- Gestão inteligente de controle de pressão, temperatura e tempo, que garante o padrão normativo de esterilização.
- Relatório com informações e registros do programa salvo na memória e impresso em papel, atendendo a RDC 15.



## DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- Sistema de alarme que indica falhas de funcionamento, pela fábrica.



## LEGISLAÇÃO


- Registro na Anvisa nº 10363350017.
- Fabricadas no Brasil de acordo com as normas nacionais e internacionais de qualidade e segurança.
- Nível de ruído de acordo com o estabelecido pela portaria ministerial do Trabalho.




## PÓS-VENDA

- Assistência Técnica Especializada.
- Agilidade nos diagnósticos e manutenções.
- Atendimento pelo WhatsApp.

## ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

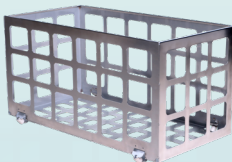

Cesto interno em aço inox, dimensões 30x30x60 cm.

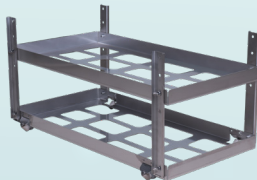

Rack interno com prateleiras em aço inox, dimensões 30x28x60 cm.



Carro externo com prateleira em aço inox, dimensões 41x109x114 cm.



Osmose reversa, água purificada para a geração de vapor, com capacidade de produção de 60 litros por hora e reservatórios de 50 ou 100 litros.



Compressor isento de óleo, reservatório em aço inox, 2 HP, 40 litros.

**CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.**

Rua São José, 3209 - Área Urbanizada II

CEP 87307-799 Campo Mourão - PR

☎ 44 3518-3464 | ✉ [larissa@crisstofoli.com](mailto:larissa@crisstofoli.com)

☎ 44 3518-3485 | ✉ [fabio@crisstofoli.com](mailto:fabio@crisstofoli.com)

[www.crisstofoli.com](http://www.crisstofoli.com)

**SOLICITE SEU  
ORÇAMENTO**

  
**CRISTÓFOLI**  
HOSPITALAR