


Baixe o Aplicativo
Cristófoli
no Google Play
ou App Store.

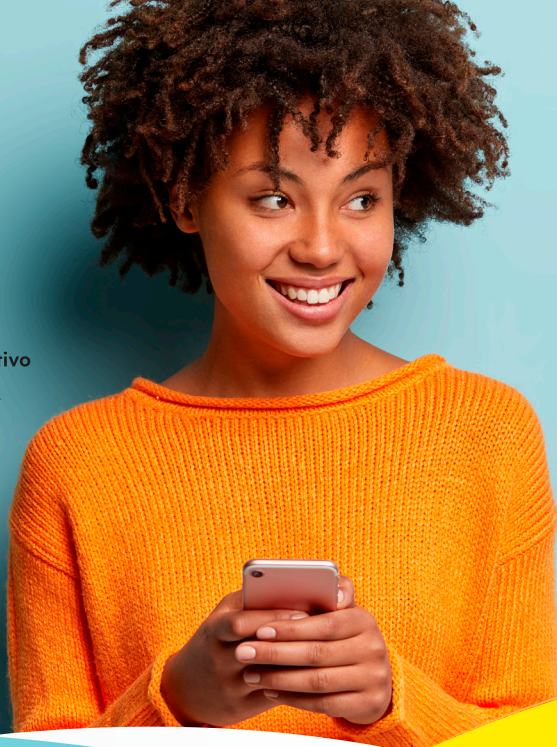

Autoclave Vitale 54L

NOVA GERAÇÃO

Autoclave Classe S (gravitacional), para esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão.

- Tela sensível ao toque.
- Conexão à rede Wi-Fi.
- Relatórios de dados pelo aplicativo da Cristófoli.
- Maior desempenho com gerador de vapor de passagem.
- 4 Pulsos de remoção de ar forçado por injeção de vapor, na fase de aquecimento.
- Porta com sistema de abertura e travamento motorizados.

DADOS TÉCNICOS

Pressão e Temperatura de Esterilização	1,2 kgf/cm ² (para ciclos de 121°C) 2,2 kgf/cm ² (para ciclos de 134°C)
Desaeração e Despressurização	Automáticas
Secagem	Com porta fechada
Capacidade	54 litros
Voltagem	220 VAC
Frequência	50/60 Hz
Abastecimento de Água	Automático
Potência	3.800 Watts
Consumo Elétrico	750 Watts/hora
Peso Líquido	81,0kg
Peso Bruto	86,0 kg
Dimensões Internas da Câmara (DxP)	34 x 66 cm
Dimensões Externas da Autoclave (LxAxP)	54 x 60,8 x 80 cm
Câmara e Tampa	Aço inox 304
Estrutura Metálica	Aço SAE 1020
Cor	Branca com teclado azul
Registro na Anvisa	10363350017

A instalação e o desbloqueio deste equipamento deverão ser realizados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. Estes serviços serão gratuitos, somente as despesas de locomoção do Técnico são de responsabilidade do cliente/comprador.

Solicite orçamento prévio na Assistência Técnica Autorizada mais próxima: www.cristofoli.com



Autoclave Vitale 54L

NOVA GERAÇÃO

Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado pela ISO 13485 e atende aos requisitos da RDC 665/2022 - BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA.



EFICIÊNCIA

- Menor consumo elétrico, possui programa inteligente de gestão de energia.
- Secagem ultra eficiente com porta fechada.
- Menor consumo de água em relação às concorrentes da categoria.



SEGURANÇA

- Elétrica e eletrônica: possui sistemas de segurança por software.
- Mecânica: tampa estampada em aço inox, selo de segurança e anti-vácuo.
- Chave eletromecânica: dispositivo que impede o acionamento do motor elétrico que tem a função de abrir e travar a porta.
- Sistema de alerta: garante o fechamento da porta.



REAL TIME

- Mantém a programação de datas, mês e ano.
- Contagem de ciclos e avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico.



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- Sistema de diagnóstico de falhas que facilita a manutenção técnica.



ESTERILIZAÇÃO

- 5 Programas: Instrumental Embalado; Instrumental Desembalado; Plásticos e Algodão; Kit Cirúrgico e Tecidos e Líquidos.
- Recursos adicionais: secagem extra, expulsão de líquidos e pré-aquecimento.
- Gestão inteligente de controle de pressão, temperatura e desaeração, que garante o padrão normativo de esterilização.
- Registro dos dados de cada programa, atendendo a RDC 15.



ATUALIZAÇÕES

- Atualização de software via wi-fi.



APLICATIVO CRISTÓFOLI

Possibilidade de gerenciamento das manutenções e visualização dos últimos 24 relatórios resumidos das esterilizações.

Baixe o aplicativo no Google Play ou no App Store.

WWW.CRISTOFOLI.COM